
Bandage de pouce Push Sports M Gauche

Art: 241312 | Marque: PUSH SPORTS



51,50€

Prix unitaire TVA incl.

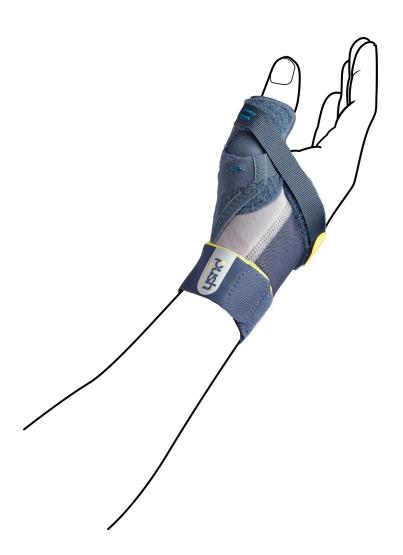

Informations sur le produit

Le Bandage de Pouce Push Sports offre une solution en cas de douleur persistante au pouce survenue à la suite d'une surtension de l'articulation centrale du pouce (MCP-1) lors d'un accident de ballon ou de ski, par exemple. Le bandage de pouce stabilise l'articulation, donnant aux ligaments articulaires touchés la chance de guérir. Le capuchon sert à protéger le pouce douloureux contre l'impact d'une balle, par exemple. Les bandes du bandage sont réglables de manière individuelle, afin que l'utilisateur puisse lui-même déterminer jusqu'à quel point il veut limiter le mouvement d'extension du pouce. Les bandes suppriment également le jeu qui s'est formé à la suite de la détérioration des ligaments articulaires. Le bandage se ferme au moyen d'une bande transversale qui apporte un soutien latéral à l'articulation centrale du pouce. Le reste des articulations du pouce, tout comme le poignet, conservent leur liberté de mouvement. Le bandage de pouce laisse la paume de la main libre et peut se porter sous un gant de

gardien de but ou un gant de ski. INDICATIONS

- En cas de pouce du skieur : luxation ou déchirure du ligament de l'articulation centrale du pouce (MCP-1)
- En cas de surtension ou de dislocation de l'articulation centrale du pouce (MCP-1)
- En cas d'instabilité au niveau de l'articulation centrale du pouce (MCP-1)
- + Offre la possibilité d'ajuster la limitation des mouvements de manière individuelle
- + Se maintient très bien en place
- + Laisse la paume libre pour une bonne prise en main et une bonne sensation de la balle
- + S'attache aisément avec une seulemain
- + Peut se porter sous un gant de ski ou de gardien de but
- + Le capuchon sert à protéger le pouce douloureux contre l'impact d'une balle, par exemple
- Ne convient pas pour l'arthrose CMC